


Tiger Dental

Patienteninformation
Patient information

TopJet ***Distalizer***

TopJet clix Distalizer

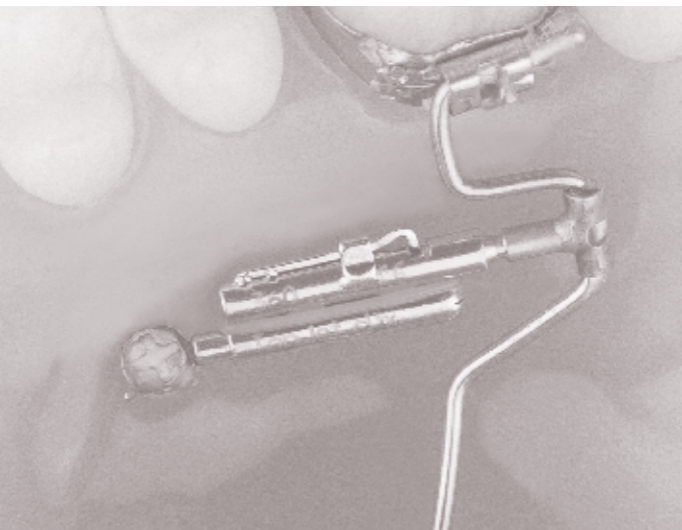

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Der TopJet Distalizer ist eine innovative kieferorthopädische Apparatur zur einseitigen oder beidseitigen Backenzahnverschiebung im Oberkiefer. Sie kann sowohl bei jugendlichen als auch erwachsenen Patienten eingesetzt werden. Der TopJet Distalizer wird zwischen Mini-Implantat und Transpalatinalbogen befestigt. Er korrigiert die Zahnfehlstellung und ohne dass Sie selbst etwas dazu tun müssen (Abb. 1).

In den ersten Tagen nach dem Einsetzen kann ein Druckgefühl auftreten, das jedoch mit der Zeit nachlässt. Es ist normal, dass Sie später keinen Druck mehr spüren und die Behandlung dabei gut läuft. Sie werden Veränderungen der Zahnpositionen und Spaltbildungen bemerken.

Die Pflege des TopJet erfolgt mittels weicher Zahnbürste möglichst nach jeder Mahlzeit. Gutes Ausspülen des Mundes ist empfehlenswert (Abb. 2). Bitte suchen Sie bei Zahnfleischentzündungen in diesem Bereich umgehend Ihren Arzt auf.

Bitte zerkleinern Sie harte Nahrungsmittel wie Äpfel, Karotten und Nüsse o. ä. vor dem Essen. Kaugummis und klebende Süßspeisen sollten während der Behandlung mit dem TopJet gemieden werden.

Mit dem TopJet Distalizer erreichen Sie Ihr Behandlungsziel mitarbeitersicher, komfortabel, sicher und schnell. Weitere Fragen beantwortet Ihre Behandlerin/Ihr Behandler sicher gerne.



1



2

Dear patient!

The TopJet Distalizer is an innovative orthodontic appliance for a unilateral or bilateral posterior tooth displacement in the upper jaw. It can be used for adolescent as well as for adult patients. The TopJet Distalizer is placed between the mini-implant and the transpalatal arch. It corrects malocclusions completely and compliance free and therefore you do not need to do anything (Fig. 1).

In the first days after insertion, a feeling of pressure will most likely occur, however, it will decrease with time. It is normal that you will not sense pressure though the treatment is well under way. During the course of treatment you will notice a change in tooth positions in terms of gap opening.

Cleaning the TopJet is very easy and can be done by using a soft toothbrush after every meal. Frequent rinsing of the mouth is recommended (Fig. 2). Please look for gingivitis in this area – if you discover a gingivitis, contact your doctor immediately.

Please chop hard food (apples, carrots and nuts, etc.) before eating. Chewing gum and sticky desserts should be avoided during treatment with the TopJet.

With the TopJet Distalizer you are reaching your treatment goal comfortably, safe and fast. If further questions emerge, please ask your treating doctor.



www.topjet-distalizer.com

Stand der Information:
Date of information:
V0.0/11/2017/11050

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications